



GRUPO PROQUIGA

PROQUI-TEST R

*Teste para a detecção de β -lactâmicos
e Tetraciclinas no leite*

NOVA LINHA DE TESTES PARA OS PRODUTORES DE LEITE E A INDÚSTRIA DE LACTICÍNIOS.


PROQUI-TEST R

1. **Teste Rápido**, de grande simplicidade de utilização.
2. **β -Lactâmicos e Tetraciclinas** detectados numa só tira
3. **Não exige incubadora**, o leite pode estar:
 - à temperatura ambiente ou
 - refrigerado (a partir de 4°C)
4. Válido para o leite de vaca, ovelha e cabra, cru e tratado.
5. Os resultados estão prontos em **5 minutos**.

PROCEDIMENTO




1.- Preparar uma amostra de leite à temperatura ambiente (não é necessária incubadora); o leite deve ser fresco e homogéneo, sem precipitação ou coágulos.

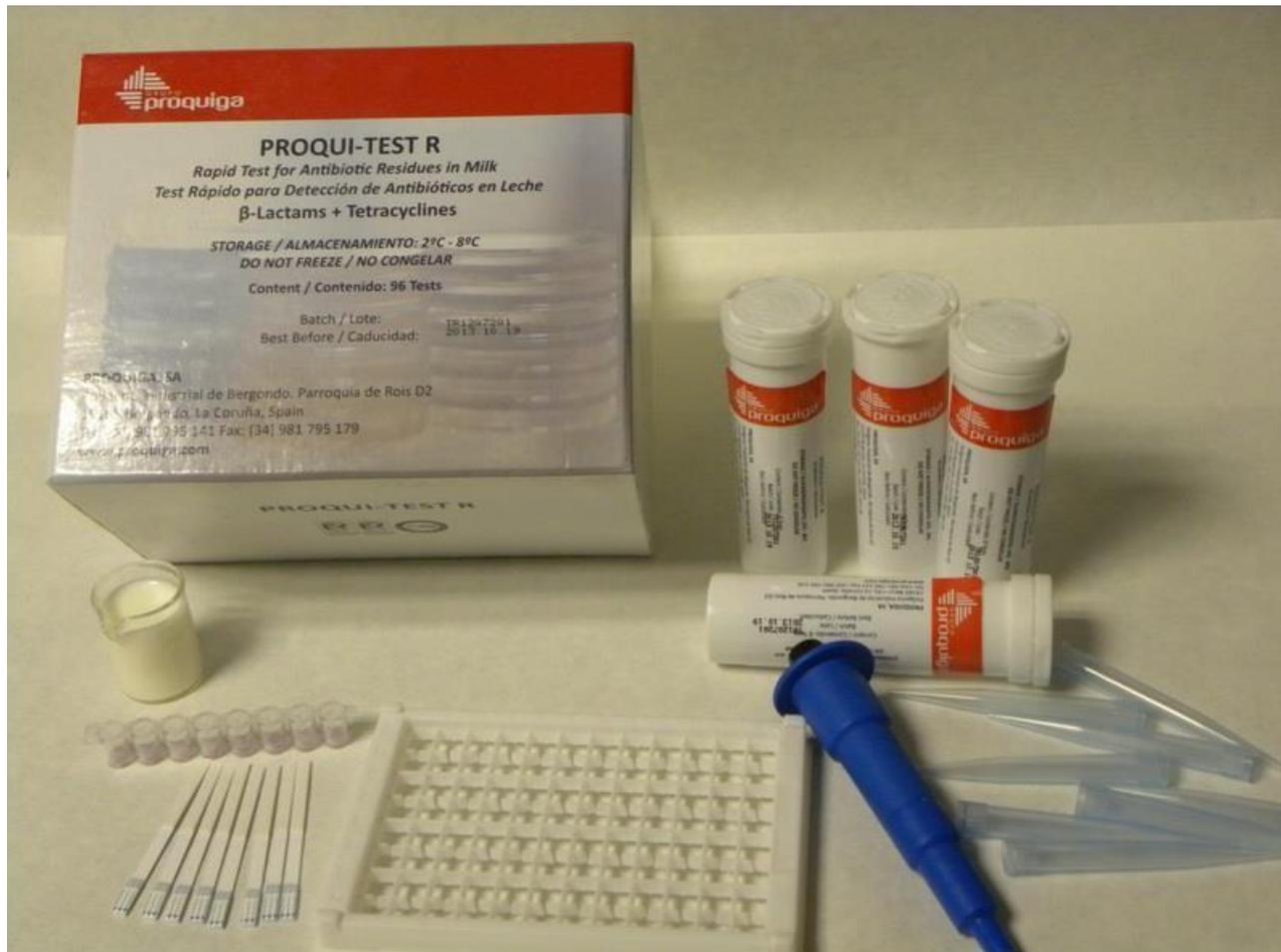


2.- Abra o tubo, retire uma tira e um micro-poço.




3.- Adicione 200 μ L da amostra de leite no micro-poço, usando a pipeta, e dissolva o reagente durante 5 minutos, até obter um leite cor de rosa homogêneo.

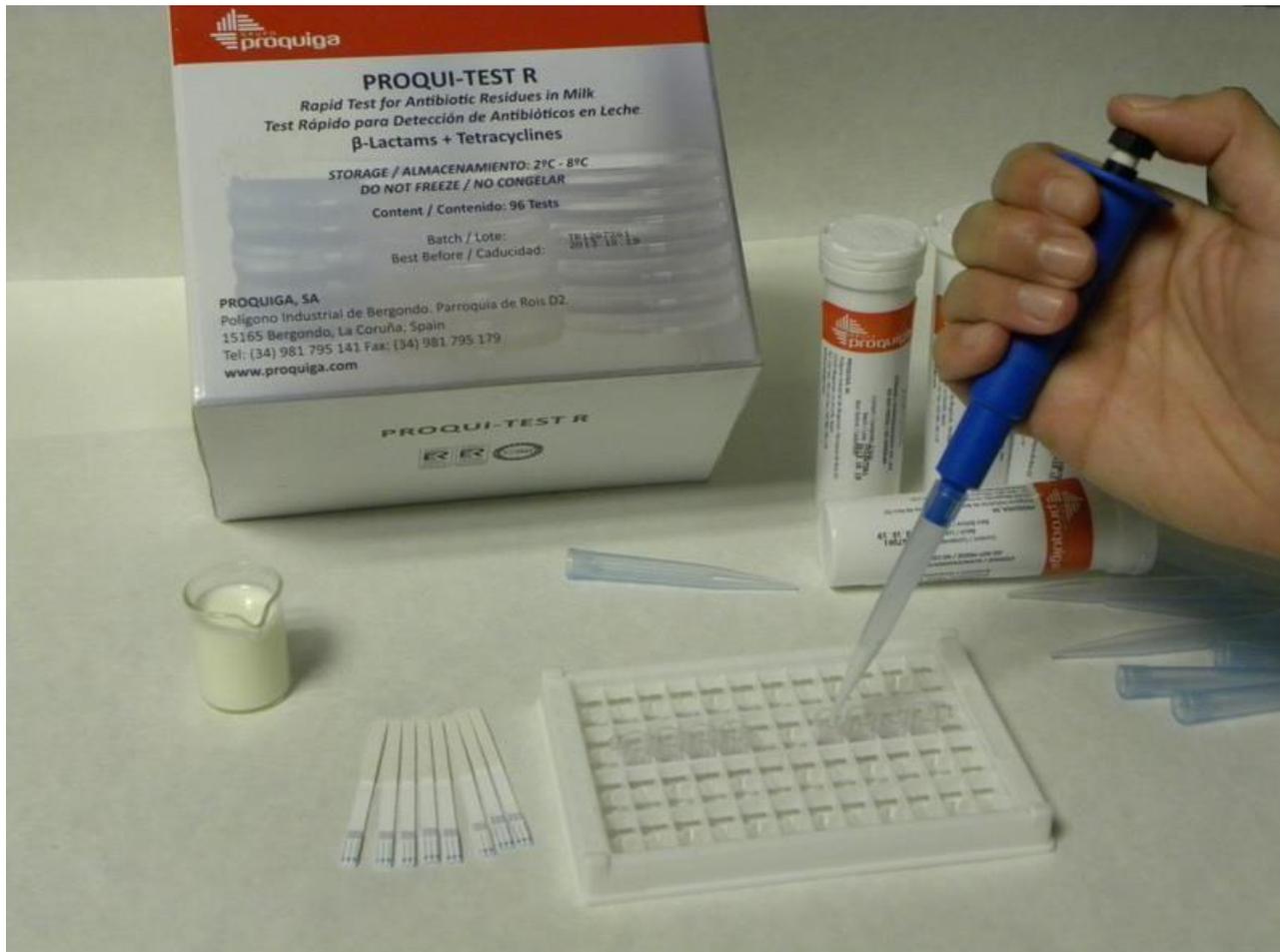

4- Introduza a tira no micro-poço (a extremidade da tira marcada com setas deve ficar em contacto com o leite).

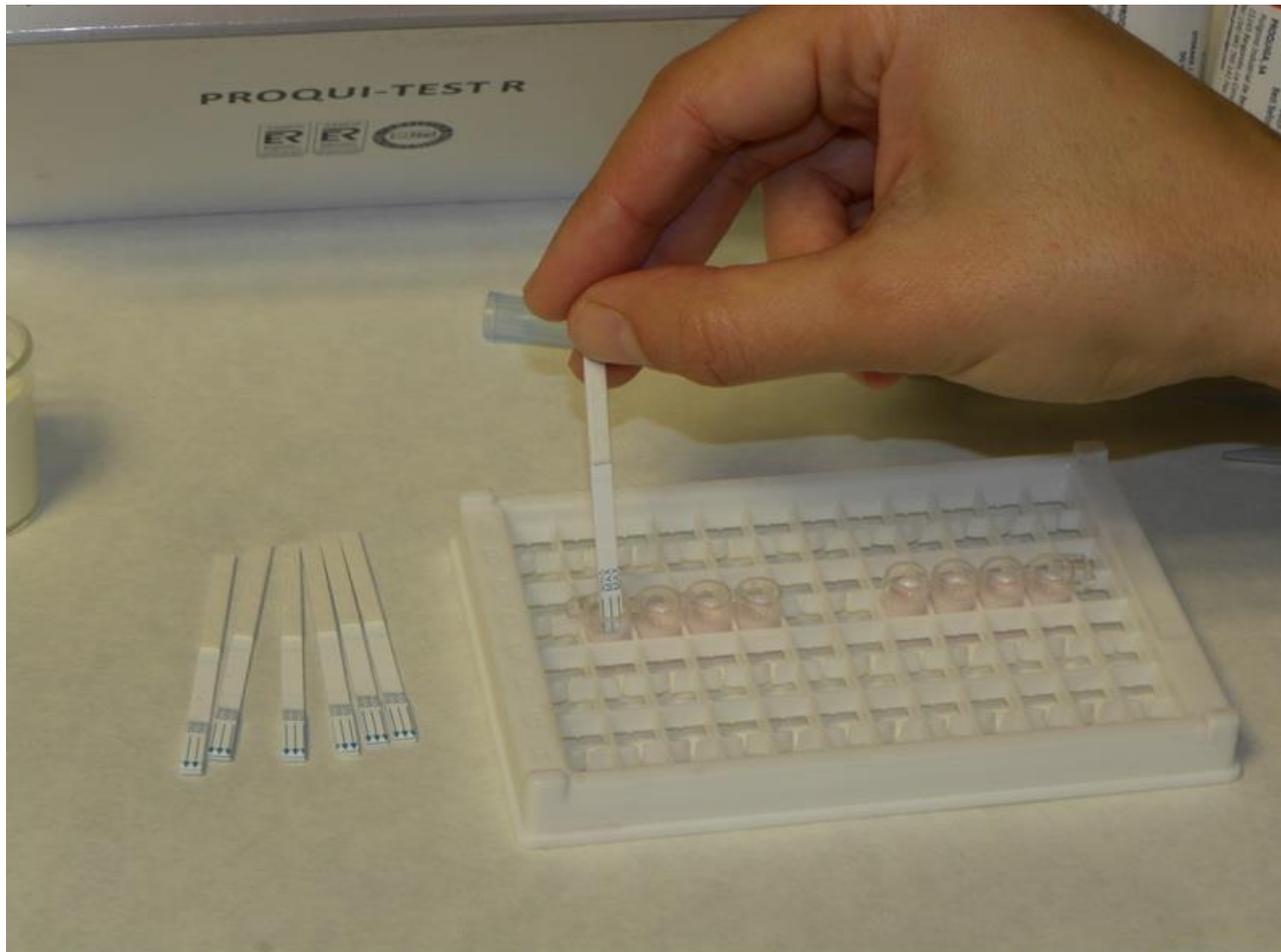

5.- Espere 5 minutos.

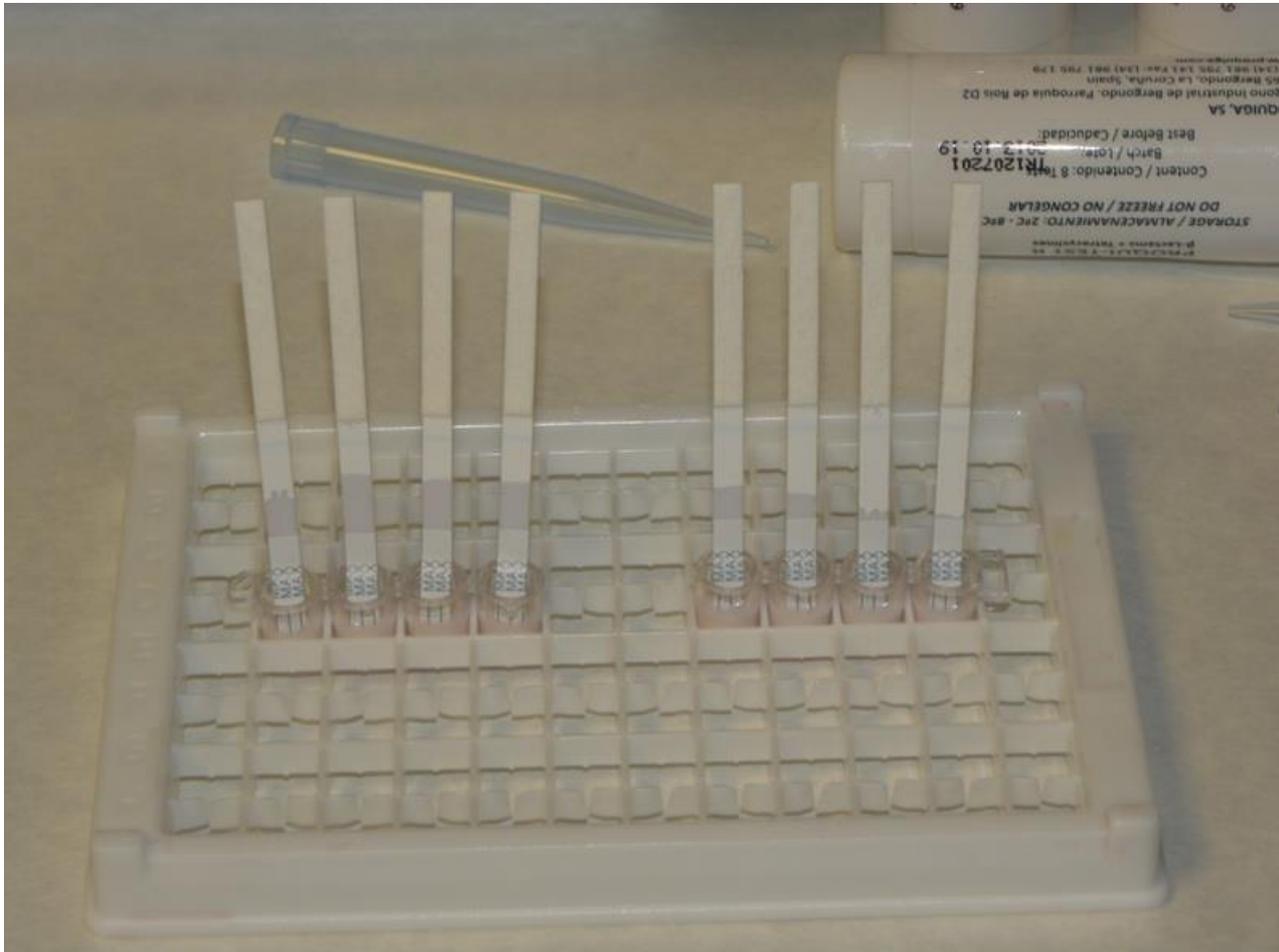



6.- Leia os resultados.

A - Positivo a tetraciclinas

B - Positivo a β -lactâmicos

C - Positivo a β -lactâmicos e tetraciclinas

D - Inválido

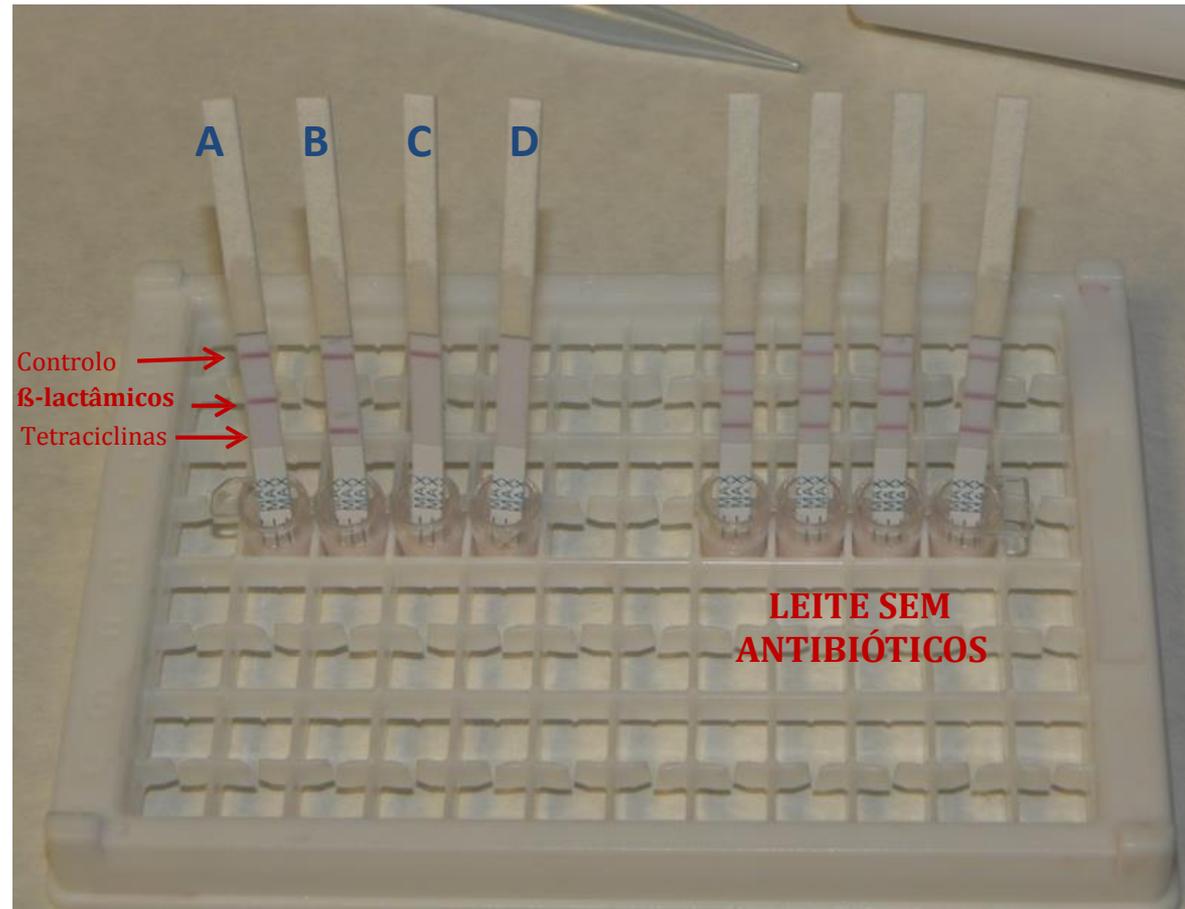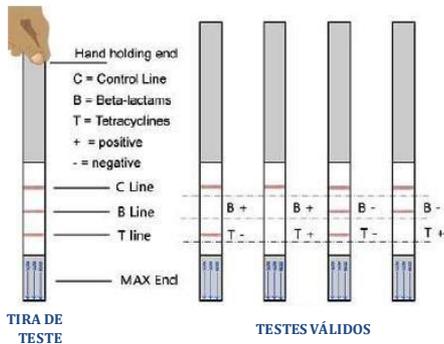

**A LINHA CONTROLO DEVE APARECER. CASO CONTRÁRIO REPITA O TESTE.
EM CASO DE PRESUMÍVEL POSITIVO, RELEIA PASSADOS 10 MINUTOS, OU REALIZE UM NOVO TESTE.**

LEITOR PROQUITEST-R



O leitor PROQUITEST -R mantém um registo informático para cada um dos resultados das amostras de leite processadas , garantindo a rastreabilidade das mesmas.



Antibiotic Analyzer

VET TEST ID : Javi B
Name :
Old :
Sex : Male

Connect

START DELETE PRINT

Ascending
Descending

| | Test Date | Test Time | SEQ | Beta-Lactams | Tetracyclines |
|---|------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 1 | 2015-07-27 | 15:19:22 | 686 | Strip Error | Strip Error |
| 2 | 2015-07-27 | 15:18:55 | 685 | Positive | Positive |
| 3 | 2015-07-27 | 15:18:25 | 684 | Negative | Positive |
| 4 | 2015-07-27 | 15:17:52 | 683 | Positive | Negative |
| 5 | 2015-07-27 | 15:17:20 | 682 | Negative | Negative |



Rapidez
Facilidade de utilização
Rastreabilidade